

Réalimentation par sonde d'œsophagostomie

Votre animal a une sonde d'œsophagostomie, elle passe directement dans l'œsophage à travers la peau. Elle est attachée par des fils de suture (cf. photos ci-dessous).



MATERIEL NECESSAIRE :

- Une seringue sèche (= seringue vide)
- Une seringue à remplir d'eau tiède (robinet ou bouteille)
- Une seringue remplie de l'aliment préalablement tiédi

1) Aboucher une seringue à la sonde. Pour aboucher une seringue à la sonde, il faut la couder au préalable pour éviter que votre animal avale de l'air (risque de flatulences, éructation). Cf photo p2.

2) Test à l'air (permet de vérifier que la sonde est bien en place).

Munissez-vous de votre seringue sèche et abouchez là à la sonde comme indiqué précédemment.

Tirer sur le piston comme pour aspirer le contenu de la sonde. Le piston est sensé revenir en place directement après l'avoir relâché.

Si vous aspirez de l'air, et que le piston ne revient pas à sa position initiale, stoppez le processus et appelez la clinique AniCura TRIOVet : la sonde peut avoir bougé.

3) Test à l'eau

Munissez-vous de votre seringue d'eau et abouchez là à la sonde comme expliqué à l'étape 1). Pousser lentement l'équivalent de 5 à 10ml d'eau.

Réaction normale : l'animal déglutit, ne réagit pas, mastique.

Réaction anormale : l'animal s'agite, tousse => Stoppez le processus et appelez-nous !

4) Alimentation

Une fois le test à l'air et le test à l'eau passés, aboucher une seringue remplie de l'aliment tiédi en respectant à nouveau l'étape 1. Faire passer le contenu de la seringue dans la sonde lentement (≈ 5 minutes pour 20ml). Donner la quantité prescrite sur l'ordonnance.

5) Rinçage

Une fois le repas terminé, munissez-vous de votre seringue remplie de 15ml d'eau tiède et utilisez-là pour rincer lentement la sonde.


- **La sonde doit être contrôlée toutes les semaines par un vétérinaire (votre vétérinaire traitant ou TRIOVet)**
- **En cas d'odeur importante ou de suintement sous le pansement, contacter un vétérinaire.**
- **Proposer toujours un peu de nourriture avant chaque repas par la sonde SAUF en cas d'INTERDICTION PAR LE CHIRURGIEN.**
- **Demander toujours conseil au vétérinaire pour savoir quel aliment proposer.**

Notez que l'aliment peut être conservé au réfrigérateur 48h.


Réalimentation par sonde d'oesophagostomie

1) Aboucher une seringue à la sonde


Sonde grand chien

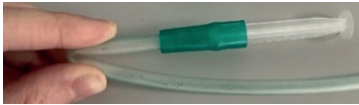


Sonde chat et petit chien

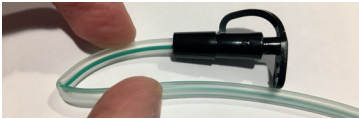

2) Test à l'air

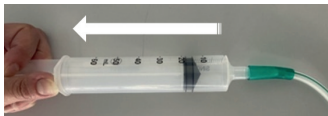

3) Test à l'eau

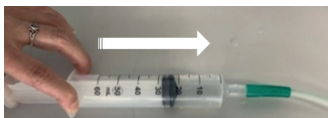

4) Alimentation



5) Rinçage

